

温熱治療と電位治療。  
ご家庭で手軽にできる  
2つの治療。

## Wellnight Life

ウェルナイトライフ HE-7100


電位・温熱組合せ家庭用医療機器

### 温熱治療

身体を温めて、血行を促進します。

#### 上下2系統でのヒーター制御▶

ヒーターは上段・下段に分かれているので、上半身/下半身それぞれで温度調節が可能です。

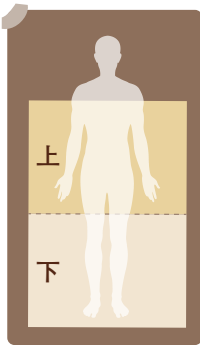

#### 温熱治療の効能・効果

##### 温熱効果

- 疲労回復 ○神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 筋肉のコリをほぐす ○胃腸の動きをよくする
- 血行をよくする ○筋肉の疲れをとる

### 電位治療

身体のまわりに電界を発生させて治療する治療法です。

#### 電位治療の効能・効果

頭痛・肩コリ・不眠症及び慢性便秘の緩解



### 温熱 & 電位 交互治療機能

温熱と電位治療を自動的に繰り返すことで、2つの治療を簡単に行うことができます。

温熱  
25分


自動的に繰り返し

電位  
5分

### 新機能


#### 均一な表面温度で快適 線面状ヒーター

ウェルナイトライフに内蔵されているヒーターは、特殊カーボンを使用した線面状ヒーターを使用。均一に発熱することができるので温度のバラつきが少なく、面全体を温めます。また「温度過昇防止機能」など、様々な保護機構により過度の温度上昇を防ぎます。

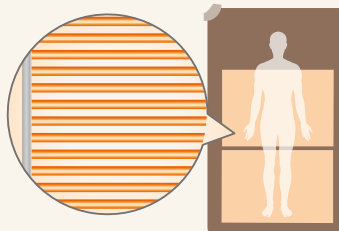


#### 快適な寝心地をサポートする 積層構造

9層もの積層構造だから毎日の使用でも安心。ほどよい硬さで人体をしっかり支え、違和感の無い寝心地を実現しました。

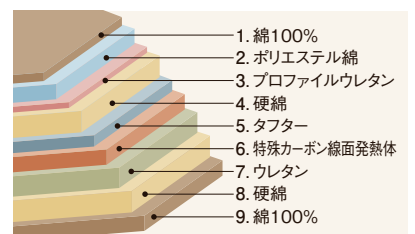

コントローラー

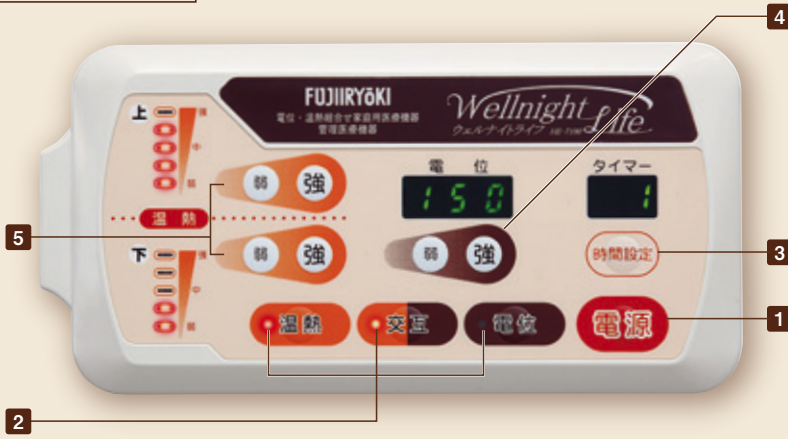

- 1 電源スイッチを入れます。
- 2 「温熱」「電位」「交互切替」のいずれかを選択します。
- 3 タイマーの時間を設定します。  
[温熱・交互]1、5、8、12時間 [電位]1、3、5、8時間
- 4 電位治療時の強弱設定を行います。  
「-150V」「-300V」「-400V」「-500V」(波高値)の4段階で設定できます。
- 5 温熱治療時の強弱設定を行います。  
「強(約48℃)」「中(約35℃)」「弱(約22℃)」  
「切」の設定を、上下それぞれで行います。

3つ折収納

ふとん感覚で3つに折りたたむことができ、押し入れにも収納できて場所もとりません。

付属品 専用シート

- 寸法(約):幅1,050×長さ2,050(mm)
- 素材:ポリエステル65%、綿35%

メーカー希望小売価格:270,000円(税抜:257,143円)

- 寸法(約):[治療導子]幅1,000×長さ2,000×厚さ70mm  
[コントローラー]幅100×長さ190×厚さ34mm
- 質量(約):[治療導子]6.5kg [コントローラー]720g
- 電源(約):AC100V 50/60Hz
- 消費電力:[温熱]195W [電位]3W
- コード有効長(約):[電源コード]1.9m [出力コード]1.3m
- タイマー時間:[温熱治療・交互治療]1、5、8、12時間 [電位治療]1、3、5、8時間  
※交互治療は温熱25分、電位5分を交互に繰り返します。
- 素材:[本体カバー生地]綿100% [クッション材]ポリエステル・ウレタン
- JANコード:4951704316385
- 医療機器承認番号:21700BZZ00452A03  
(管理医療機器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器)



Wellnight Life  
ウェルナイトライフ HE-7100  
電位・温熱組合せ家庭用医療機器



安全に関する  
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 下記のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがありますので使用しないでください。
- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器 ○心電計等の装着型の医用電気機器
- 次の人は医師とご相談の上使用してください。
- ①悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ②心臓に障害のある人 ③温度感覚喪失が認められる人 ④妊娠初期の不安定期又は出産直後の人 ⑤糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人 ⑥安静を必要とする人 ⑦体温38℃以上(有熱期)の人 例1)急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期 例2)衰弱しているとき ⑧せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性疾患の人 ⑨低温やけどをしたことのある人 ⑩次の人で、1時間を超えて使用する場合(・不整脈のある人・ぜん(喘)息の人・睡眠時無呼吸症の人・高血圧の人)

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器  
フリーダイヤル

0120-027612

受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分  
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 06-6644-9103

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受け付けております。  
http://www.fujiiryoki.co.jp/

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。  
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、  
まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における  
個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のために、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、  
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!  
フジ医療器ホームページ  
http://www.fujiiryoki.co.jp/

フジ医療器製品の消耗品・別売品の  
お取寄せはコチラ!!  
フジ医療器モール  
http://www.fuji-mall.com/

フジ医療器商品が当たる! 最大30万円相当!!  
プレゼントキャンペーン 毎月実施中!

フジ医療器 HPからはコチラ!  
http://www.fujiiryoki.co.jp/  
ケータイからはコチラ!  
http://www.fujiiryoki.co.jp/\_m/

QRコード  
ケータイから  
カンタンアクセス



●お求めは…

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**  
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
右記の販売店にご相談ください。  
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。