

FUJIIRYŌKI

電位・エアマッサージ組合せ家庭用医療機器
ウェルナイトエアースペース

エアーマッサージ器 NA-580(N)



健康のために、楽しい1日のために
ほほえみながら目覚めよう



1日のスタートは
目覚めで決まる。
眠っている間に元気を回復するのが
理想のスタイル。




毎日の暮らしの中で 自然に続けられる 健康づくりが求められています。

多くの人が、毎日の生活習慣によって健康を維持しようと心がけています。また、ストレッチやマッサージもひとつの健康づくりとして実施されているようです。ムリなく、手軽に心地よく、そんな健康づくりを願う人が多いのです。

ゆっくりと横たわってラクな姿勢で、気軽に健康づくりをしていただくために、「ウェルナイトエアースペース」はあります。マッサージ機能と電位治療機能を搭載した、マットレススタイルの医療機器「ウェルナイト エアースペース」で、心地よい健康づくりをお楽しみください。

健康維持の為に普段実施していることは？

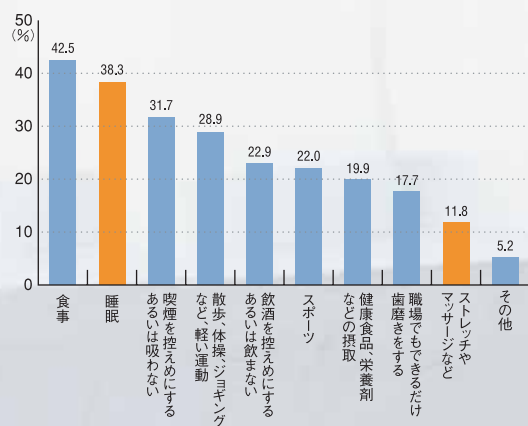

出典：生活情報センター 2005年版「食と安全と健康意識のデータ集」

マッサージ機能

体を横たえてゆっくりとくつろぎながらマッサージを楽しむ、そんな贅沢な時間を、マッサージ機能を搭載した「ウェルナイト エアースペース」なら手軽に毎日続けていただけます。

多彩なマッサージで、コリをほぐし、血行を促進

肩と首を手の平で押すように、ソフトなタッチでしかもしっかりとマッサージする3Dエアークラッシュ構造を採用しています。さらに、独立制御の12個の電磁弁で、背クロスストレッチなどの多彩なマッサージを実現。パイプ振動と脚枕エアークラッシュのマッサージで、脚の血行促進に働きかけます。


■3Dエアークラッシュ構造

●首・肩マッサージ停止時




エアークラッシュがフラットな状態に納まるため、凹凸がなく、心地よく眠れます。

●首・肩マッサージ時

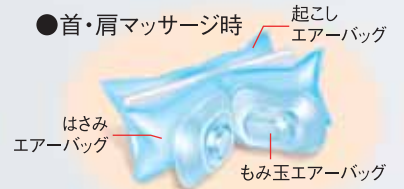

3つに分かれた首・肩エアークラッシュの立体的な動きで、コリを感じる部分をしっかり気持ちよくマッサージ。

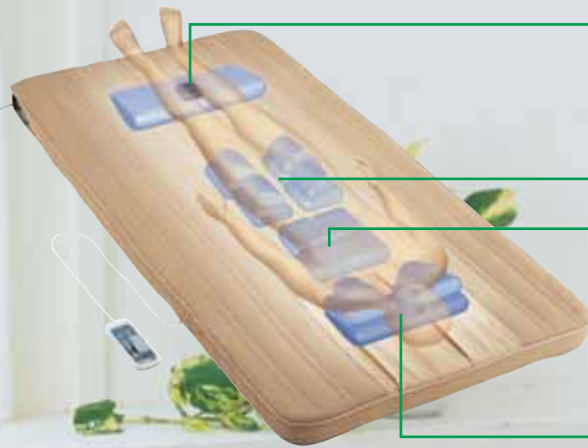

■脚マッサージ／脚の血行を促進。

第2の心臓と呼ばれる脚を持ち上げる脚枕エアークラッシュ機能とパイプ振動マッサージにより、脚の血行を促進します。足元の冷えが気になる方にもおすすめです。



■背腰もみ／背中と腰の緊張を緩和。

背クロスストレッチ機能などの多彩なマッサージで、背中から腰まで心地よくほぐします。



■首肩もみ／本格的な首肩マッサージ。

3Dエアークラッシュ構造によって、肩を上から押さえ、さらに首すじを左右から寄せ、広げる、立体的な動きを実現し、コリに作用します。



■エアーマッサージの効能・効果

◎あんま・マッサージの代用

疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる・筋肉のコリをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩和



電位治療機能

「ウェルナイト エアースペース」は、ゆっくりと心地よく横になって健康づくりをしていただくために、電位治療機能を採用しています。気になる不快な症状を改善へと導き、すっきりとした目覚めのお手伝いをします。

自然のバランス調節機能に働きかけます。

体は、体内で各種機能のバランスを自然に調節しています。このバランスがくずれた時に、頭痛、肩コリ、不眠症、慢性便秘などの不快症状が現れやすくなるのです。電位治療は、そんな体内のバランス調節に働きかけます。

■電位治療の効能・効果
頭痛、肩コリ、不眠症、慢性便秘

【電界】



電位治療イメージ図

■電位治療とは？

体のまわりに電界を発生させ、体に本来備わっているさまざまな調節機能に働きかけるのが、電位治療です。

元気になろうとする力を応援する、体思いの治療法なのです。

快適な寝具環境

健康づくりに役立つ眠りを実現するために、より快適な寝具環境を追求しました。寝心地がよく、手軽に清潔さを維持することができ、心地よい温度と湿度を管理できるよう工夫しています。

■サラッとして、クッション性のある生地を使用

マットレスの縫製カバーに、ダブルラセル生地を使用しました。立体中空構造によって、体との接触面に空間を作って通気を確保。汗などの水分・湿気がマットレスに溜まりにくく、サラッとした感触を実現します。さらに、この立体中空構造により、寝床にかかる体圧を均一に分散し、心地よいクッション性を発揮。このような通気性と体圧分散が、血流障害をおさえます。



優れた通気性・放湿性



■寒い季節にうれしいヒーター機能

冬の冷たい寝具は、眠りを妨げる原因のひとつになってしまいます。「ウェルナイト エアースペース」は、ヒーター機能を搭載。25～50℃まで5段階で温かさの調節が可能です。12時間のタイマー付きで、自動的に電源をオフにします。



使えるリモコン

多機能を簡単操作で自由自在に!

■簡単操作

コース選択や部位動作の選択、電位治療など多彩な機能をわかりやすく、使いやすく配置しました。

■便利なリピート操作

お気に入りの動作を簡単に繰り返しお楽しみいただけます。

■最短コード、最適の配置

眠りを妨げず収納しやすいように、リモコンコードをできるだけ短くし、上部横側に配置。コードの絡みつきを防ぎます。



コース選択

3つの自動コースから、体調や時間に合わせて、最適なコースをボタンひとつで選択できます。

電位治療

体調に合わせて、1時間、4時間、8時間から選べます。

ヒーター機能

約25～50℃まで5段階で温度調節ができます。12時間オフタイマー付き。

強さ

強・中・弱の3つから、心地よい強さが選べます。

お好み部位コース

首・肩と背・腰、2つのコースから選んでマッサージができます。

リピートボタン

続けたい動作を繰り返して楽しむことができます。

バイブ機能

血行促進に効果的な脚部のバイブ動作が選択できます。

脚枕機能

血行促進に役立つ脚部マッサージ機能が選べます。



標準価格:350,000円(税抜333,334円)

- 本体寸法(約):幅95×長さ200×厚み8(cm)
- 質量(約):14.3kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:エアーマッサージ器/68W 電位治療器/3W 電気布団/75W
- コード有効長:電源/(約)2.3m・コントローラー/(約)1.0m
- タイマー時間:【マッサージ】15分・【電位】1・4・8時間切替・【ヒーター】12時間
- 素材:【本体カバー生地】ポリエステル100%【クッション材】ウレタンフォーム
- 付属品:電位・エアーマッサージ器専用シート(CF-07BE)
- JANコード:4951704752183
- 医療機器承認番号:21700BZY00278000(管理医療機器)

3つ折収納

ふとん感覚で3つに折りたたむことができ、押し入れにも収納できて場所を取りません。



■付属品 専用シート CF-07BE

耐洗濯性・寸法安定性にすぐれているので、シワになりにくく、お手入れが簡単。さらに抗菌加工が施されているので、清潔。取り外しが簡単なフィットシートタイプです。

- 寸法(約):幅105×長さ200(cm) ●素材:ポリエステル100%



安全のために必ずお守りください

危険

- 次のような医用電気機器をお使いの方は、医用電気機器の故障や、身体に重大な被害を招くおそれがありますので、ご使用にならないでください。
- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器 ●心電計等の装着形の医用電気機器
- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

注意

- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている方 [例] 血栓症、重度の動脈硬化、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症 [皮下組織の炎症を含む] など
- 次の方は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。
- 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の方 ●妊娠初期の不安定期、または出産直後の方 ●悪性腫瘍のある方 ●心臓に障害のある方 ●安静を必要とする方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方 [例] 急性炎症症状 [倦怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期や衰弱しているとき ●治療部位に創傷のある方 ●骨粗しょう症の方 ●背骨に異常のある方や曲がっている方 ●貧血症の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●温度感覚喪失が認められる方、または皮膚に異常のある方 ●低温やけどをしやすい方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- ご使用中、身体に異常を感じたときには、直ちに使用を中止してください。

■保証期間 本体1年(保証書、取扱説明書は記載内容を十分にご確認のうえ、大切に保管してください。)



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒556-0006 本社:大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号

(信類のネットワーク) 札幌・仙台・青森・秋田・盛岡・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・神奈川・名古屋・静岡・金沢・大阪・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・山口・高松・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成19年10月現在のものです。

●お求めは…