



※画面はハメコミ合成です。




コリや痛みは、 弱りはじめた身体の シグナルです

多くの人が、肩こりや腰の痛み、手足の筋肉痛を感じています。忙しい毎日、社会不安、複雑な人間関係など、ストレスに満ちた今の生活は、あらゆる形で健康な身体を知らず知らずのうちに蝕んでいるのです。身体にたまった疲れや不調の回復は、多くの人の願いです。


●体調不良を訴える人*の上位5症状(複数回答)

※有訴者率:322.5(単位:人口1000人中)

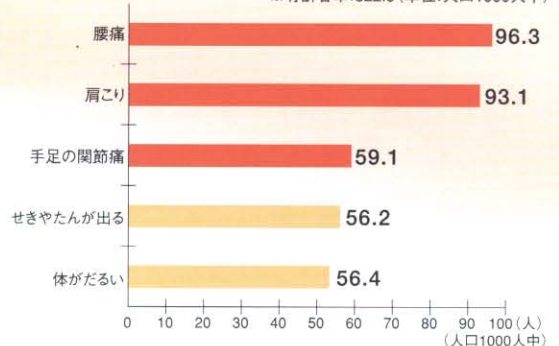

●通院者*の上位5傷病(複数回答)

※通院者率:313.8(単位:人口1000人中)

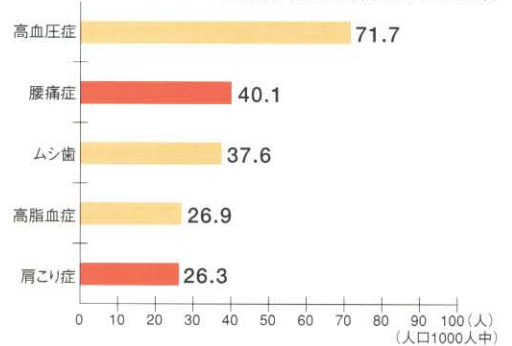

資料:厚生労働省統計情報部「平成13年国民生活基礎調査の概況」

肩こりを感じている人が93.1人いるのに対し、肩こりで通院している人はわずか26.3人。肩こりはつらい症状であるにもかかわらず、病院に行くほどではないと思われているようです。自分で手軽に治療する方法こそ、今求められています。

※文中の人数の単位は人口1000人中

コリや痛みを自分で治せたら…。
心地よいあたたかさで、
やさしい刺激に包まれながら
回復を実感できたら…。
それは、多くの人の願いです。

低周波療法

低周波療法とは、比較的低い(1200Hzまで)周波数の電流が、筋肉や神経に効果的な刺激になることを利用した治療方法です。低周波の刺激で筋肉を収縮させて血行を促進させ、コリや痛みをやわらげます。

効能・効果

末梢神経マヒ・肩コリ

血行促進・疲労回復


神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

筋肉の疲れをとる・筋肉のコリをほぐす

筋の状態に合わせて治療できる7つのモード


※波形は実際とは異なり全てイメージです。

たたく

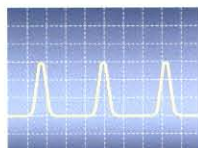


人間がたたく速度で10段階に変化させ、コリをやわらげます。

もむ

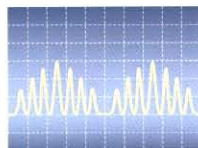


患部をもみながら効果的に痛みやコリをほぐします。

おす

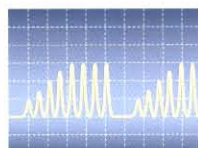


親指でグイグイと押し込む指圧感覚で、効果的に患部の痛みを治療します。

パイプ

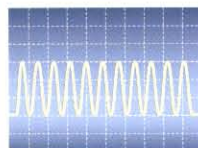


連続した周波数で振動を与え、痛みやコリをほぐします。

さざなみ

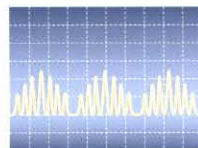


患部をたたきながらもみほぐす感覚で、コリや疲れをやわらげ、血行を促進します。

うねり

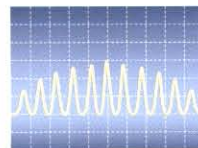

波が大きく打ち寄せるような感覚で筋肉をほぐし、比較的広い範囲を刺激します。

キアズマ

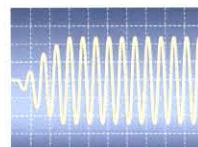

圧迫と弛緩の繰り返しで筋肉を刺激して血行を促進、患部の痛みをやわらげます。

しなやかな若い枝が、風や雨に負けないように。
コリや痛みをやわらげて、もっと元気に、もっと楽しく。

5つの自動コース

患部の特長に対応した自動コース設定



肩

肩こり、疲労 肩・首の痛みなどに

大きな動きをする肩には、筋肉のポンプ作用を助ける、たたきともみを中心とした、心地よいマッサージを。

たたき もみ さざなみ バイブ



背

背中の張り 疲れ、筋肉痛などに

背中から身体全体におおいかぶさるように広がる疲れは、おす、もむ、たたきを組み合わせ合わせた変調波形のうねりが効果的。

おす うねり もむ たたく さざなみ



腰

神経痛、疲労 腰のコリや筋肉痛などに

腰には、しっかりと深部に届くようなもみをベースに、おすモードを組み合わせる。

たたき もみ おす さざなみ バイブ



腕・脚

手足のしびれ 筋肉痛、血行障害などに

部分治療に有効な、比較的周波数の高い波形の刺激のパラエティ豊かな組み合わせ。

おす バイブ さざなみ たたく うねり



関節


神経痛 腱や筋肉の痛みなどに

関節は、神経が集中する大切な場所だから、やさしいもみが中心。静かに確かに血行促進や痛みの回復を。


もみ おす バイブ さざなみ

キアズマクロス

深く心地よいもみの刺激を生むクロスパワー

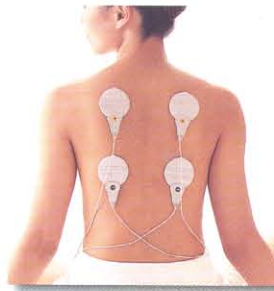


キアズマクロスは、4つの電流が交わることで生まれ、痛みやコリを広い範囲でとらえて、強く効果的な刺激で、コリや痛みをやわらげていきます。

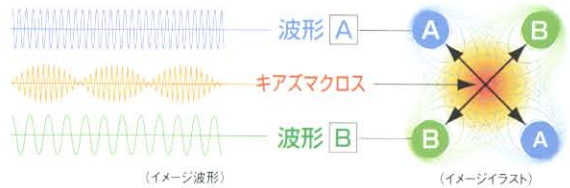

ソフトスタート機能

小さな刺激でやさしくスタート


突然の強い刺激で身体が驚かないようパルス電圧の一部をカットしながら、やさしくスタートします。

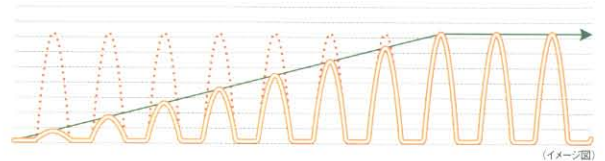

ヒーター機能

患部を温めて、効果的なマッサージを

パッドには、低周波の治療中も約38度の心地よい温度で温めることができるヒーター機能を装備。さらに約43度を加える温熱療法の機能も。

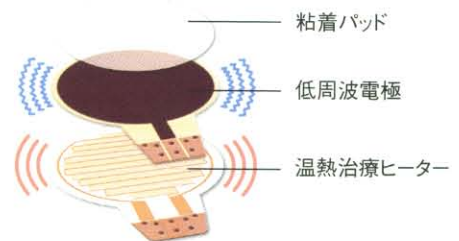

バリエーション

さらに多彩な治療ができる高機能

同時4カ所治療、極性や連続・断続の切替、強さ調節など多様な症状に多彩な機能で応じます。

ダブル出力

極性切替

連続/断続切替

強さ調節

温熱療法

温熱療法は、患部を直接温めることで、血液の循環を促進させて、身体にたまった疲れやコリをほぐしたり、神経痛、筋肉の痛みをやわらげたり、胃腸の働きを活発にする治療方法です。

効能・効果

血行促進・疲労回復・胃腸の働きを活発にする
筋肉の疲れをとる・筋肉のコリをほぐす
神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

温熱機能

3つの温熱機能を使い分け



① 温熱

約43度の適温で患部をしっかり温めて温熱治療を施します。

② ヒーター

パッドは常に温か。低周波治療中にも作動して、快適な温度でご使用いただけます。

③ 予熱

使用前に約40秒間パッドを温めます。冬でも装着時のヒヤッとした不快感がありません。

温熱マット

より広範囲の効果的な温熱治療のために



温熱療法によさをもっと広い範囲で実現したい、患部をやさしく包み込んで効果的に癒したい、そんな願いから生まれた温熱マット。両肩を同時に包み込んだり、片方の肩だけ、背中、腰、腕、脚と必要な場所に、しっかりと馴染んでやさしく、心地よく治療します。


■身体のさまざまな部位にフィットします



あたたかさは、
心にも、身体にも心地よい。

●サーモグラフィで見る温熱マットの効果

冷えた身体は、筋肉が硬直して血管を圧迫し、血行障害を起こしやすい状態です。温熱マットで身体が温まると筋肉が弾力を増して血管が拡がり、スムーズな血流に。

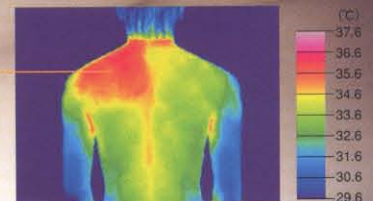

[左肩温熱マット使用時の皮膚温度の例]


温熱マットは、固定用バンド2本で身体に効果的な状態で心地よくフィットさせることができます。また約50°C(弱)と60°C(強)の2段階の温度調節が可能です。

組合せ療法

パルスドックDXは、低周波や温熱の治療はもちろんのこと、低周波と温熱を一定間隔で交互に使用する組合せ療法を行うことで、より満足な使用感が得られます。

低周波療法 + 温熱療法

↓
[組合せ療法]

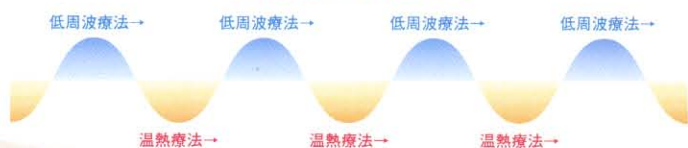

組合せ療法のよさは、それぞれの効果と心地よさを自動的に交互に実感できることにあります。

※温熱マットと組み合わせることはできません。

液晶画面

優れた機能を備えていても、すべての機能を使用できなければ意味がありません。パルスドックDXなら、多彩な高機能を手軽に使いこなしていただけます。大型の液晶画面に表示される通りにボタン操作するだけで、お好みの治療が、スタートします。


効能効果
肩こり
末梢神経マヒ
の改善

操作の手順はもちろん、パッドの装着位置も、イラストでわかりやすく表示されます。

自動コース
お好みのボタンを
押して下さい
手動選択
機能ボタンを
押して下さい



機能ボタンを押し
選択して下さい
たたき さざなみ
もむ うねり
おす キアズマ
パイブ

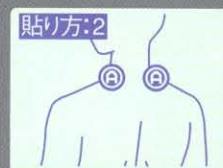

どんな治療が行われているか、もみ方や強さ、速さまで表示され、お好みの治療が確認できます。



スタイリッシュデザイン

まるでノート型パソコンのように、コンパクトでモダンなデザイン。付属のセミソフトケースに入れて、旅先、出張先にも携帯していただけます。



治療導子や粘着パッドなどの大切な付属品は、本体内にすっきりと収納することができます。



※画面はハメコみ合成です。

使う人にやさしい機能とパネル表示

※画面はハメコミ合成です。

対話型の液晶画面を採用

大きなボタンで扱いやすい操作パネル

5つのコースが選べる自動コースボタン

7つのモードが選べる機能ボタン

自分にぴったりの治療プログラムを登録

マイメモリー機能

コリや痛みなど、一人ひとり異なった症状に対処するため、自分の好みにあったモードを記憶させることができます。

微妙な強さが調整できるジョグダイヤル

温熱マット 出力A 出力B

3つの温かさが選べる治療導子

その他の機能

- 極性切替機能
- 断続／連続の切替機能
- 一時停止機能
- ロック機能
- 15分／30分切替機能
- 速さ調節機能

PULSE DOC DX

パルスドック

組合せ家庭用電気治療器 PD-M68

メーカー希望小売価格:291,900円(税抜:278,000円)

◎本体仕様

- 寸法(約):幅295×奥行190×高さ57(mm)
- 質量(約):1.3kg(ACアダプター含む)
- タイマー設定時間:15分/30分
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(約):65W(温熱マット「強」のとき)
30W(治療導子「温熱機能」のとき)
- 医療用具承認番号:21500BZZ00627000号
- JANコード:4951704102148

◎温熱マット



- 寸法(約):幅530×奥行330×高さ15(mm)
- 質量(約):1.0kg
- 電源:DC24V(本体ジャックより入力)
- 本体表面温度(約):50°C(弱)/60°C(強)
※(社)日本ホームヘルス機器工業会で定めた測定方法による
- ヒーター:シリコンコードヒーター採用(遠赤外線放射セラミックシート内蔵)
- 温度過昇防止装置
サーモスタット(×3個)・温度ヒューズ(×3個)

◎付属品



- ① セミソフトケース
- ② 治療導子コードリール(2個)
- ③ 粘着パッド4枚入り(2個)



② ③ <ACアダプター>



<治療導子>

安全に関する
ご注意



ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をお読みになり、正しくお使いください。

医師の治療を受けている場合は、必ず医師とご相談のうえ、ご使用ください。

■医療電子機器をご使用の方は使用しないでください。◎ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器◎心電計等の装着型医療電子機器◎人工心肺等の生命維持用医療電子機器 ■次の方は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。◎急性疾患の方◎悪性腫瘍のある方◎感染症疾患のある方◎妊娠中の方◎心臓に障害のある方◎熱の高いとき◎安静を必要とする方◎自分で意思表示できない方◎皮膚知覚障害、又は皮膚に異常のある方、低温やけどをしやすい方◎医師の治療を受けている方、特に身体に異常を感じているとき

●ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒556-0005 本社:大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号
(信頼のネットワーク) 札幌・帯広・仙台・青森・秋田・盛岡・山形・福島・高崎・
栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・名古屋・静岡・三重・
岐阜・金沢・福井・大阪・奈良・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・
山口・高松・徳島・松山・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※この価格は、平成16年4月現在の消費税率を基に表示を行っています。
※本カタログの記載内容は、平成16年6月現在のものです。

●お求めは…