

組合せ家庭用電気治療器(電位治療器・低周波治療器)

エレドック PX-13800

メーカー希望小売価格:698,000円(税抜:664,762円)



仕様

- 寸法(約) / ■本体:幅265×奥行225×高さ470(mm)
■絶縁マット:幅1200×長さ2200(mm)
■通電シート:幅595×長さ280(mm)
- 本体質量(約):9.0kg ●電源電圧:AC100V(50/60Hz)
- 電源コードの長さ(約):1900(mm) ●高圧中継コードの長さ(約):2100(mm)
- 医療用具承認番号:21600BZZ00653000
- 電位治療器
 - 消費電力(約):17W(9000V時) ●出力電圧:3000V、6000V、9000V ●使用時間:20分/40分/60分
 - 安全装置:○使用時間設定タイマー内蔵により最大60分で出力を自動停止します。
○出力部に保護抵抗を直列接続して電流の流れを制限しています。
○接続検知機能により低周波治療器との同時使用はできません。
- 低周波治療器
 - 消費電力(約):22W(ヒーター「ON」時) ●発振周波数(約):1~1200Hz ●使用時間:15分/30分
 - 安全装置:○使用時間設定タイマー内蔵により最大30分で出力を自動停止します。
○電源投入時は急激な刺激を防止するため常に出力強さは「ゼロ」です。
○接続検知機能により電位治療器との同時使用はできません。

別売品 マイナスイオン発生器 MH-001

■心が癒され、ゆっくりリラックス

私たちの暮らしは、様々な形でプラスイオンの多い環境を形成しています。マイナスイオンを発生させることで、室内環境を改善し、気分が爽快になりリラックス感が得られます。

- 仕様:AC100V(50/60Hz) ●寸法:幅208×奥行86×高さ67mm ●質量(約):500g
- 電源コード長さ(約):2.5m ●方式:コロナ放電式 ●送風ファンモーター:DCブラシレスファンモーター
- マイナスイオン発生量:120万個/cc(吹出し口) ●定格回転数:3,500rpm

メーカー希望小売価格:オープン価格


FUJIROYOKI

組合せ家庭用電気治療器
(電位治療器・低周波治療器)
エレドック
PX-13800



いつも、やさしく。ときには、しっかりと心地よく

電位と低周波、
癒しの機能を1台に集約

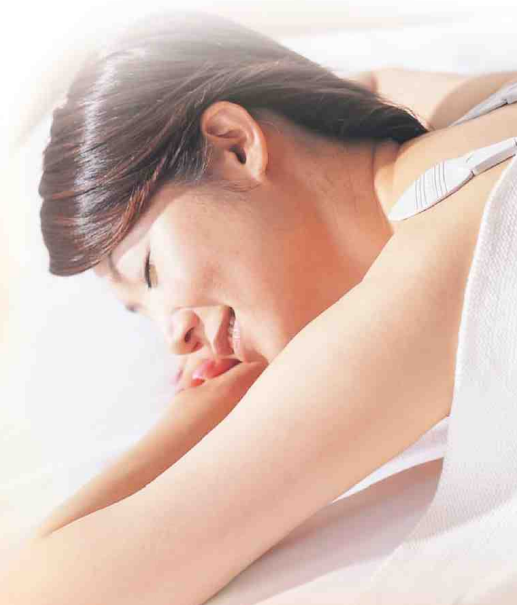

安全のために
必ずお守りください

- 次のような医用電子機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器●心電計等の装着形医用電子機器
- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は、ご使用にならないでください。

- 次の方はご使用をさけるか、必ず医師にご相談のうえご使用ください。
- 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の方●妊娠初期の不安定期、または出産直後の方●悪性腫瘍のある方●心臓に障害のある方●安静を必要とする方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●体温38℃以上(有熱期)の方●急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や表露しているとき●感染症疾患のある方●自分で意思表示できない方●過労を帯びている方●温度感覚喪失が認められる方、または皮膚に異常のある方、低温やけどをしやすい方●医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じているとき
- 次の方は、取り扱える人が必ず付き添ってご使用ください。
- 介護が必要な方、子供●取扱説明書の内容を理解できない方
- ご自身以外(友人など)の方がご使用されるときは、付き添うか、よく説明してご使用させてください。お使いになる方に、取扱説明書を読んでからお使いになるようご説明ください。 ●乳幼児および身体に障害のある方にはご使用にならないでください。 ●飲酒時や、睡眠薬を飲んだときはご使用にならないでください。 ●薄着が着られている時は、ご使用にならないでください。 ●ご使用中の人には触れないようにしてください。 ●ご使用中、身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。

■保証期間 本体1年、付属品1年、別売品1年(保証書、取扱説明書は記載内容を十分にご確認のうえ、大切に保管してください。乾電池、粘着パッドは保証対象外です。)



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、潮気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

●販売元(取扱い・お求め・お問合せ)

総販売元

株式会社 フジ医療器

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号
TEL: (06) 6644-5233

製造販売元

九州日立マクセル 株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680番地



元気になる暮らしを、始めたい。
ゆったりと電位治療。
しっかりと低周波治療。

コンパクトボディに、 電位治療と低周波治療の機能

エレドックは、コンパクトなボディに電位治療と低周波治療の機能を搭載した家庭用の治療器です。電位治療は、頭痛、慢性便秘、肩コリや不眠症に効果を示し、低周波治療は、マッサージ効果で疲労回復や筋肉の痛みの緩和を助けます。ふたつの治療法を体調や気分に合わせて使い分けて、元気になる暮らしをはじめませんか？

電位治療とは？

身体が本来もつ
元気になろうとする力に働きかける、
生体に電界を作用させる治療法です。

私たちの身体は、健康を保つために体内で各種機能のバランスを自然に調節しています。このバランスがくずれた時、さまざまな不快症状を感じるようになるのです。電位治療とは、そんな体内バランスに働きかけて、不快な症状を緩和し、健康的な身体づくりを応援します。

◎電位治療の作用

電気的に絶縁した身体に交流電位を与えて、身体周囲に電界を発生させ、その電界が生体に与える好ましい作用を利用したものです。

◎効能・効果

頭痛、肩コリ、不眠症、慢性便秘

低周波治療とは？

筋肉細胞に直接働きかけて
コリや痛みをやわらげる治療法です。

私たちの身体には脳や心臓、神経から電気信号を伝えるごく弱い電流が流れ、機能のコントロールをしています。この電流がスムーズに流れないと筋肉が硬くなり、血行不良によって痛みやコリが生じる原因ともなっています。

低周波治療とは、低い周波数の電流で外部から神経を刺激し、硬くなった筋肉の動きをよくして血行をよくし、痛みやコリをやわらげる治療法です。

◎低周波治療の作用

●低周波の電流により、筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、血行をよくします。

◎効能・効果


肩コリ、末梢神経まひ、マッサージ効果（血行をよくする、疲労回復、筋肉痛、神経痛の痛みの緩和、筋肉のコリをほぐす、筋肉の疲れをとる）

電位治療機能

多彩な機能、 シンプルな操作性

■変化のある通電治療を実現する4つの波形

常に効果的な治療を続けていただくために、4つの波形を採用しています。変化のある通電治療で身体の慣れを低減します。

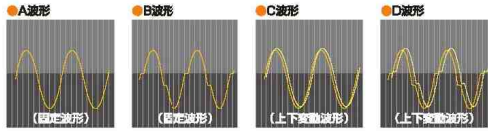

■マイコンが自動的に電圧を変化させるゆらぎ波形を採用

むずかしい操作は必要なく、ゆらぎ波形によってより変化のある治療を行うことができます。

■体調やお好みに合わせて、簡単にプログラム

電圧の強さは低3000V、中6000V、強9000Vの3段階、波形はABCDの4つ、通電時間は20分、40分、60分の3種類から選べます。

初めての方は短時間、低電圧から始めてください。

■選択コース使用プラン

※表は一例です。体調に合わせてお使いください。

	電圧	出力波	通電時間
1週目	3000V	A波形:	20分
2週目	"	B波形:	20分
3週目	6000V	C波形:	40分
4週目	"	D波形:	40分
5週目	9000V	A波形:	60分
6週目	"	B波形:	60分
7週目	"	C波形:	60分
8週目	"	D波形:	60分
9週目以降	体調やお好みに合わせて選択		

時間は1日60分を限度にお使いください。
無理な使用は体調を悪くする原因になります。

注意 通電中に他の人や物(金属性)に触れると痛みをとまなう刺激を感じる場合がありますご注意ください。



じつくりと、心地よく
しっかりと、実感して
疲れをケアするために
スタート


低周波治療機能

痛みやコリにやさしい刺激 使いやすい低周波機能

■コリの種類に合わせて選択できる多彩なもみ波形

たたく、もむ、おす、パイプ、さざなみ、うねりの6つのもみ波形を採用しています。手動コースでは、患部のコリや痛みの症状に合わせて、自由に選択し組み合わせていただくことができます。

筋肉のコリの状態に合わせて治療できる6つのモード

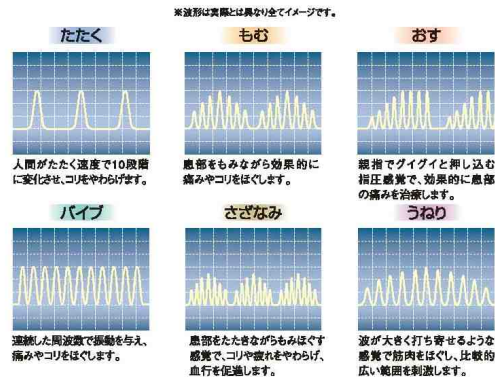

■患部の特性に対応した3つの自動コース設定

「肩」、「背」、「腰」の3つの自動コースを設定しています。それぞれの患部に合わせてもみ波形のプログラムを選択できます。



肩コリ、疲労肩・血行促進に
大きな動きをする肩には、筋肉のポンプ作用を助ける、たたきともみを中心とした、心地よいマッサージを。

たたく もむ さざなみ パイプ



背中からの張り疲れ、コリに
背中から身体全体におおいかぶさるように広がる疲れは、おす、もむ、たたきを組み合わせた変調波形のうねりが効果的。

おす うねり もむ たたく さざなみ



神経痛、疲労、腰のコリや筋肉痛などに
腰には、しっかりと深部に届くようなもみをベースに、おすモードを組み合わせて。

たたく もむ おす さざなみ パイプ



ある日のエレドッグ ヘルシープログラム

体調の良い日は電位治療をメインにして、身体の内側から元気を目覚めさせましょう。疲労を感じたり、コリや痛みの強いときは低周波を組み入れましょう。じっくりと自分の身体と向き合えば、必要な癒しの方法が見つかります。

AM 06:30 心地よく自然な目覚め

AM 07:30 朝食をしっかり、おいしく

AM 10:00 電位治療で元気を充電



AM 12:00 昼食は好きなものを

PM 05:00 仕事や用事のない日は、ウォーキング

PM 06:00 早めのヘルシーな夕食を

PM 08:00 コリや痛みを感じたら入浴後に低周波治療



PM 10:00 おやすみの前に低周波治療で疲れを回復



小さな工夫が
心と身体にあったかい
ハートに届いたわり機能

検電器



■通電を光でお知らせ丸いボディのパートナー
電位治療は、体感の少ない治療法です。治療中であることを忘れて、治療の終了に気づけなかったり。そんなうっかりを防ぐために、検電器を採用しました。丸いボディの可愛い検電器を、治療のパートナーとして、ご利用ください。

ヒーター機能



■患部にやさしい温かさ
治療導子には、ヒーター機能を採用しています。これによって、患部に触れたときのひんやり感を防ぎ、快適な治療を行います。

毎日、心地よく続けていただくために。



■収納に便利、紛失を防止
リモコンホルダー。(付属品)
本体の後ろに見えいがちなリモコンをセットできるホルダーを設置しました。

■キャスター付きのコンパクトボディ。
コンパクトなボディは、設置しやすく、キャスターによって移動も簡単です。

使いやすさの工夫。充実のセット内容

■付属品



●セミソフトケース
付属品をすっきりと整理収納できるケースをセットしました。紛失の防止にも役立ちます。

●通電シート
(通電シートカバー付)

●高田中継コード
●電源コード

●検電器

●絶縁マット

●コードホルダー(6個)

●治療導子
●治療導子コードリール(1個)
●粘着パッド4枚入り(1個)

●リモコンホルダー●単3形アルカリ乾電池(2個)●単4形アルカリ乾電池(3個)

操作手順をガイドする、わかりやすい液晶パネル



■スイッチをいれたら、
液晶表示パネルにご注目!
コース選択、治療の内容など、必要な情報は、液晶パネルに表示されます。電源を入れたら、ここに注目すれば、簡単に操作できます。



リモコン【電位治療の操作】

■リモコンは、電位治療専用
電位治療に必要な操作は、リモコンで行います。
シンプルなボタン操作で、必要な設定が簡単に行えます

切換



操作パネル【低周波治療の操作】

■本体の操作パネルは、低周波治療専用
よりシンプルな操作を実現するために、本体の操作パネルは低周波専用になっています。