

FUJIIRYŌKI

からだ全体のコリ  
気になりませんか？

肩

腰

腕

足



肩



背から横脇に当たるように、縦にして使用。

腰



中央の仙骨に当たるように、縦にして使用。

腕



肘から先を止めバンドで固定。机での使用もOK。

尻



お尻の横部分(大殿筋)に当てて使用。

ふくらはぎ



寝た状態で、気になる部分に当てて使用。

足裏



椅子または床に座り、本体に足裏を当てて使用。


# 全身のコリに、磁気のシャワー。

磁気が身体に作用するメカニズムを採用  
コンパクトな家庭用治療器で  
毎日の健康管理を

身体に刺激を感じさせずに、手軽にコリや血行を改善するマグネストーム。N極とS極が交互に入れ替わり、身体の中を磁力線が行ったり来たりする磁気のシャワーが、コリや血行を改善させます。

磁気のシャワーにより  
体内に誘導電流が発生

コリと血行を改善

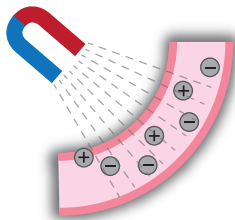

無音  
無感

音や振動が気になる方でも  
快適にご使用いただけます

※磁気の振動を体感できるテスターシート付



マグネストーム  
MS-100

メーカー希望小売価格  
236,190円(税抜)

販売名	マグネストーム	定格電圧	AC100V
分類	管理医療機器	定格周波数	50Hz / 60Hz
類別	機械器具81 磁気治療器	定格容量	110/94VA
一般的名称	家庭用電気磁気治療器	本体外形寸法	約96×220×47mm
医療機器 認証番号	220AFBZX00089A02	質量	約1.8kg
JANコード	4951704850452	最大磁束密度	100mT (β max)
付属品:	テスターシート、テスターシート止めバンド、本体カバー、専用ケース、専用ケース止めバンド、取扱説明書・保証書	安全装置	モジュール温度制御回路 温度ヒューズ・電子タイマー15分

効能・効果：装着部位のコリ及び血行の改善

ご家庭で使用できる電気磁気治療器

## コリと血行の改善に マグネストーム MS-100



安全に関する  
ご注意

- 次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがあるので使用しないでください。  
ペースメーカーなどの体内挿込み型医用電気機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式ジャケットなど。
- 次のような場合もしくは医師の治療を受けている方は、本器を使用するに際して医師と相談のうえ、その指示に従ってください。  
悪性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/体温38℃以上(有熱期)の人/安静を必要とする人/ねんざ、肉離れなどの急性とう痛性疾患の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/温度感覚喪失が認められる人/皮膚に感染症または創傷のある人

- 他の治療器や電気製品との併用は誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
- ご使用中は、時計・磁気カードなど磁気の影響を受けるものは近づけないでください。
- 低温やけどの恐れがありますので、衣服の上からご使用ください。
- ご使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 本器に万一故障などが発生した場合は、ただちに使用を中止し、ご購入先までご連絡ください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器  
フリーダイヤル

0120-027-612

受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分

※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号

06-4793-0818

Web

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。  
[www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

FAX・Webでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。  
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、  
まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における  
個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、  
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器ホームページ  
[www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

フジ医療器製品の消耗品・別売品の  
お取寄せはコチラ!!

フジ医療器モール  
[www.fuji-mall.com](http://www.fuji-mall.com)

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
右記の販売店にご相談ください。

または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

日本製

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
●本カタログの記載内容は、平成 30 年 7 月現在のものです。

16.10.2S.DS.AA.C 注文No.1288