


AS-880 音声操作使い方ガイド

1  を押すと受付音が鳴り、操作パネルのランプが点灯する。


マイクに向かって命令コマンドを言うと、それに従って動作する。

- マイクの近くで、大きな声ではっきりと命令コマンドを言ってください。
- 命令コマンドは省略したりせず、一覧表どおりに言ってください。
- 発音やイントネーション(抑揚)ができるだけ命令見本の音声に近づけてください。
- 命令コマンドを認識できなかった場合は動作しません。
- ランプは約10秒後に消灯します。点灯している間に命令コマンドを言ってください。
ランプが消灯した場合、もう一度  を押してください。
- 命令した動作(自動コースやマッサージ中の調節など)の結果は、リモコン表示で確認してください。

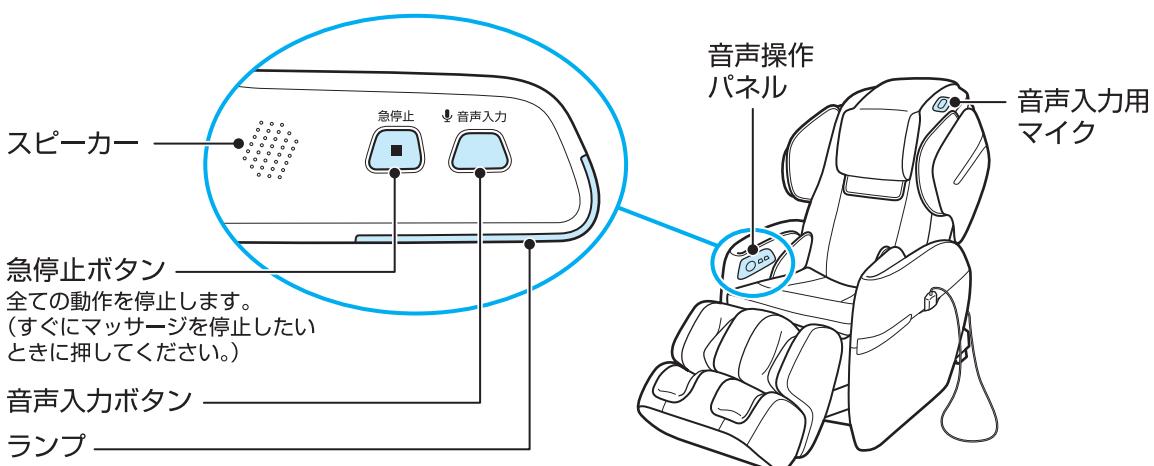

背もたれ部や脚部のリクライニング動作について、音声命令で操作できる範囲には制限があります。(挟み込み防止のため)

- 音声命令では、背もたれ部はマッサージポジション以上には倒れません。フルリクライニングまで倒したい場合は、リモコンで操作してください。
- マッサージポジションよりも背もたれが倒れているときに背もたれを倒す命令をすると『リクライニングは一番倒れた角度です』または『マッサージモードです』と音声が流れ、それ以上背もたれは倒れません。

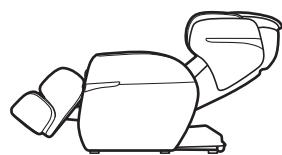

マッサージポジション

- 音声命令では、脚部は最後まで収納されません。完全に収納したい場合は、リモコンで操作してください。
- 脚部が右図①の位置にあるときに脚部を下ろす命令をすると『脚部は一番下にあります』または『椅子モードです』と音声が流れ、それ以上脚部は下がりません。



音声命令一覧表

	動作内容	命令コマンド
リクライニング	背もたれを起こす（※1）	起こす（おこす）
	背もたれを倒す（※1）	倒す（たおす）
	脚部を上げる（※1）	上げる（あげる）
	脚部を下げる（※1）	下げる（さげる）
	マッサージポジションまで自動リクライニング（※1）	マッサージモード（まっさーじもーど）
自動コース	椅子として使うとき（※1）	椅子モード（いすもーど）
	全身疲労回復コース	全身コース（ぜんしんこーす）
	首・肩疲労回復コース	肩コース（かたこーす）
	背・腰疲労回復コース	腰コース（こしこーす）
マッサージ中の調節	ストレッチコース	ストレッチコース（すとれっちこーす）
	肩位置を上に調節	肩位置上（かたいちうえ）
	肩位置を下に調節	肩位置下（かたいちした）
マッサージ中の調節	マッサージを強くする（肩7・背3・腰7）	強く（つよく）
	マッサージを中間の強さにする（肩4・背2・腰4）	中間（ちゅうかん）
	マッサージを弱くする（肩1・背1・腰1）	弱く（よわく）
	エアーマッサージを強くする（肩3・腕3・腰横3）	エアー強く（えあ一つよく）
	エアーマッサージを弱くする（肩1・腕1・腰横1）	エアー弱く（えあ一よわく）
その他	脚部マッサージを強くする	脚部強く（きゃくぶつよく）
	脚部マッサージを弱くする	脚部弱く（きゃくぶよわく）
	脚ストレッチのON/OFF	脚ストレッチ（あしすとれっち）
その他	背ヒーター・足裏ヒーターのON/OFF	ヒーター（ひーたー）
	マッサージを終了する	終了（しゅうりょう）
	命令コマンドの見本を読み上げる（※2）	命令見本（めいれいみほん）
その他	命令を実行する / しない	はい / いいえ

※1 リクライニング関連の命令をすると『周囲の安全を確認されましたか？』という音声が流れます。周囲の安全を確認してから「はい」と言うと命令を実行します。「いいえ」と言うと動作を中止します。「椅子モード」を実行すると、マッサージが終了します。

※2 命令コマンドの読み上げを命令すると『全ての命令を読み上げますか？』という音声が流れます。「はい」と言うと全ての命令を読み上げます。「いいえ」と言うと読み上げを中止します。