

ここではエアーマッサージ器「DF-313」の設置方法と操作方法を簡単に表示しています。
ご使用前には付属の取扱説明書を必ずお読みいただき「安全上のご注意」をお守りください。

操作方法

表示が見やすく、使いやすいリモコンです。

スタート/切ボタン

エアーマッサージの「入/切」を切り替えます。

停止ボタン

ただちにすべての動作を止めます。

コース表示ランプ

選択されたコースが点灯します。

コース選択ボタン

「おやすみ前」「おめざめ後」「ゆったり」の3種類のコースが選べます。

強さ表示ランプ

選択された強さが点灯します。

強さ選択ボタン

「弱」「中」「強」のマッサージ強さが選べます。

マッサージ動作位置ランプ

マッサージ部位が点滅します。

ひねりボタン

ひねりのマッサージが選べます。

ストレッチボタン

ストレッチのマッサージが選べます。

脚枕

入/切ボタン

脚枕の「入/切」を切り替えます。

表示ランプ

脚枕が動作すると点灯します。

バイブレータ

入/切ボタン

バイブレータの「入/切」を切り替えます。

表示ランプ

バイブレータが動作すると点灯します。

ヒーター

入/切ボタン

ヒーターの「入/切」を切り替えます。

設定温度ランプ


選択されたヒーターの設定温度を表示します。

温度設定ボタン

押すごとに5段階の設定温度が選べます。

主電源ランプ

電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れると点灯します。

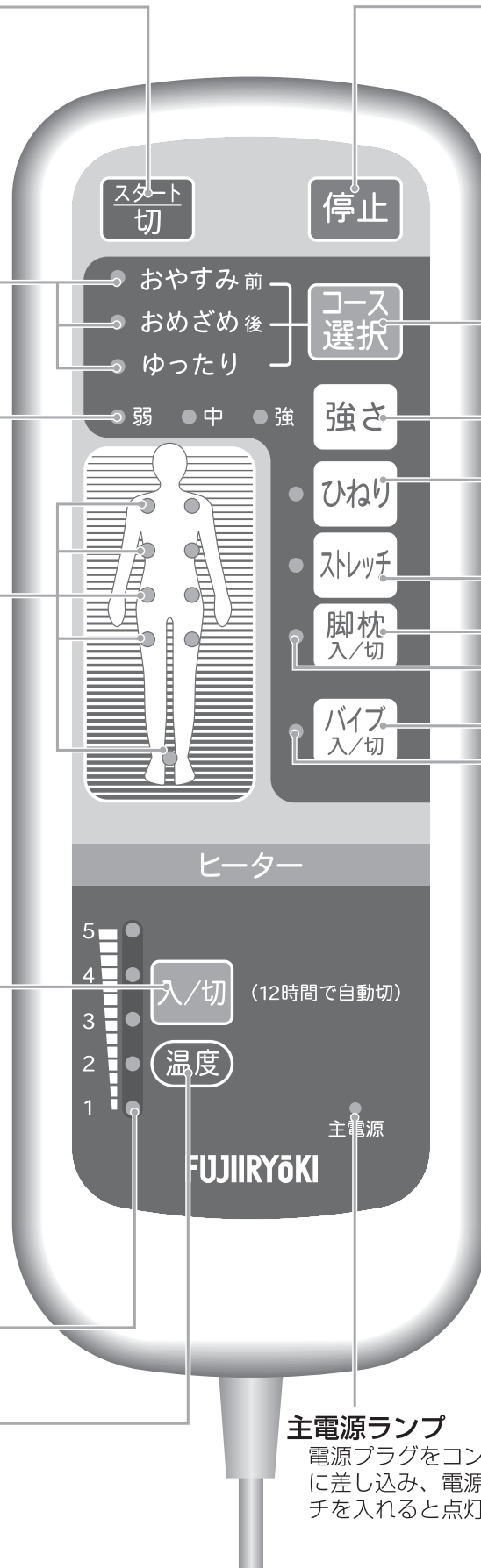


ここではエアーマッサージ器「DF-313」の設置方法と操作方法を簡単に表示しています。
ご使用前には付属の取扱説明書を必ずお読みいただき「安全上のご注意」をお守りください。

設置方法

1 本体を広げる


上向きに寝たときに、電源コードのある方を足元にする

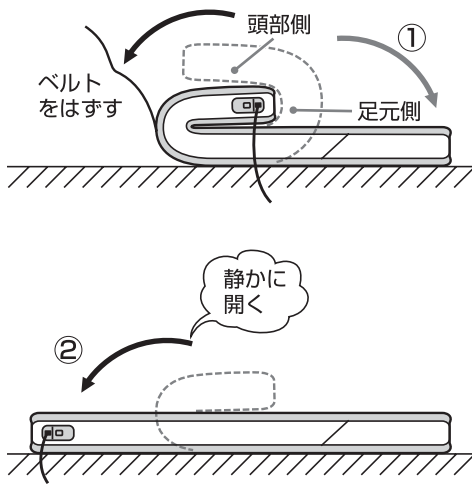

- 折れぐせが残っていることがありますが、使用することにより徐々に直ります。


お願い

- ベルトをはずした後は、本体を広げる前にマジックテープを必ず元に戻してください。また、ベルトを掛けるときはマジックテープカバーをはずしてください。

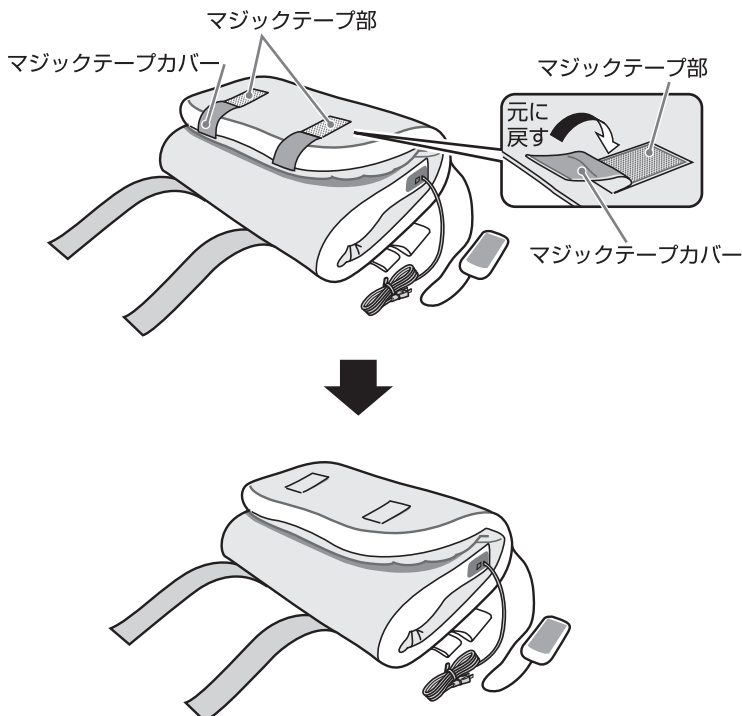


2 電源を入れる

①電源プラグをコンセントに差し込む

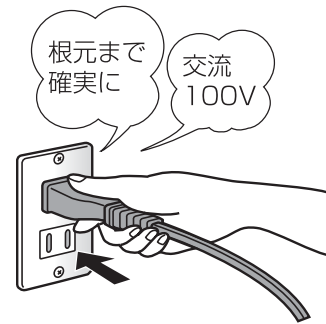


②電源スイッチを入れる

- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。

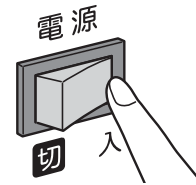

- リモコンの主電源ランプが点灯します。

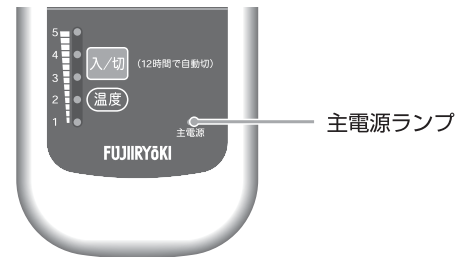

3 本体に横たわる

①本体の頭側を確認して本体に横たわる

